

Laboratory Washer for Glassware | 全自动、台式

AW62

Made in Japan

清洗时间（各工序）	0~30分可设定
-----------	----------


洗净水温	45~80℃
------	--------

台式、全自动清洗机。


对应实验室器具的清洗需求而提供的小型强力清洗机。

- 从洗净到漂洗全工序全自动运行，各工序状态由状态显示。
- 根据溶剂的形状，受污重量及程度可以任意选择洗净工序及时间。
- 使用水温大幅影响洗净效果，本设备内置洗净水加热器，无需另行配备热水器及相应配管作业。
- 紧凑台型式，标配转台及上下2个方向的强压喷水机构。如需纯水漂洗，需使用纯水供给装置。纯水供给装置（选配）可作为设备架台使用，不会另占空间。
- 洗净液无法充分到达内部，污物无法洗净时，请更换喷射框（选配）使用。

工序·时间表

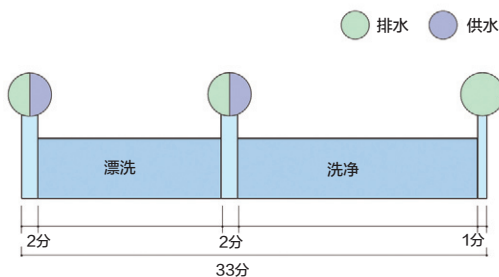

尺寸图 (mm)

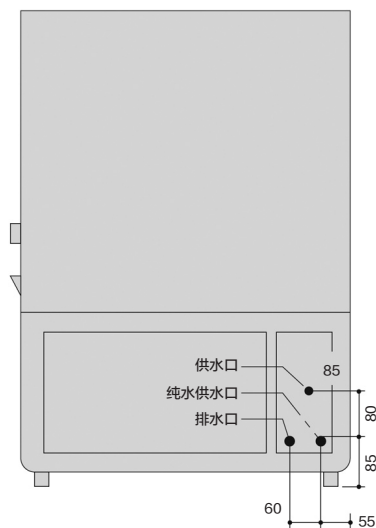

规格

型式		AW62	
性能	洗净方式	上下2方向压力水喷射方式，喷嘴固定 框回旋式（可更换喷射框）	
	清洗循环工序	清洗（0~30分钟）可设定 漂洗（0~30分钟）可设定 纯水漂洗（选配）（与纯水供给装置接续）纯水20L清洗 上述工序可任意选择	
		供水温度	室温~60℃
		洗净水温度	45~80℃
		热水供水方式	加热器（内置：6kW）
	供水压	0.1~0.3MPa	
	容器架台	回旋台（标配）（框架选配）	
	供排水方法	供水：电磁阀开关、水量由液面控制开关控制 排水：自然落差排水	
	构造・规格	外装	钢板，表面耐药品性喷涂
内装		不锈钢板	
外形尺寸		宽600×深620×高940mm	
内槽尺寸		宽594×深572×高564mm、有效高度：345mm	
回旋台		直径550mm（最大承重25kg）	
泵		三相AC200V 250W	
门		上下开闭式（任意位置停止）	
重量		约90kg	
电源（50/60Hz）		三相AC200V 30A	
附属品	供水管（带结合器）2m 1根、排水管（内径25.4mm）1.5m 1根 专用洗涤剂（无磷）1kg、计量勺（50mL用）1个 树脂盖、喷嘴刷1个 供水口组件1套		

13 — 清洗机

灭菌器 1

造粒干燥装置 2

马弗炉 3

恒温箱 4

恒温

第 5 章

.....

制造装置

恒温水槽 8

恒温

旋转

.....

及所

振荡器

清洗机 13

选购品 14